


iWALK 3.0

FREIHAND-KNIEKRÜCKE

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

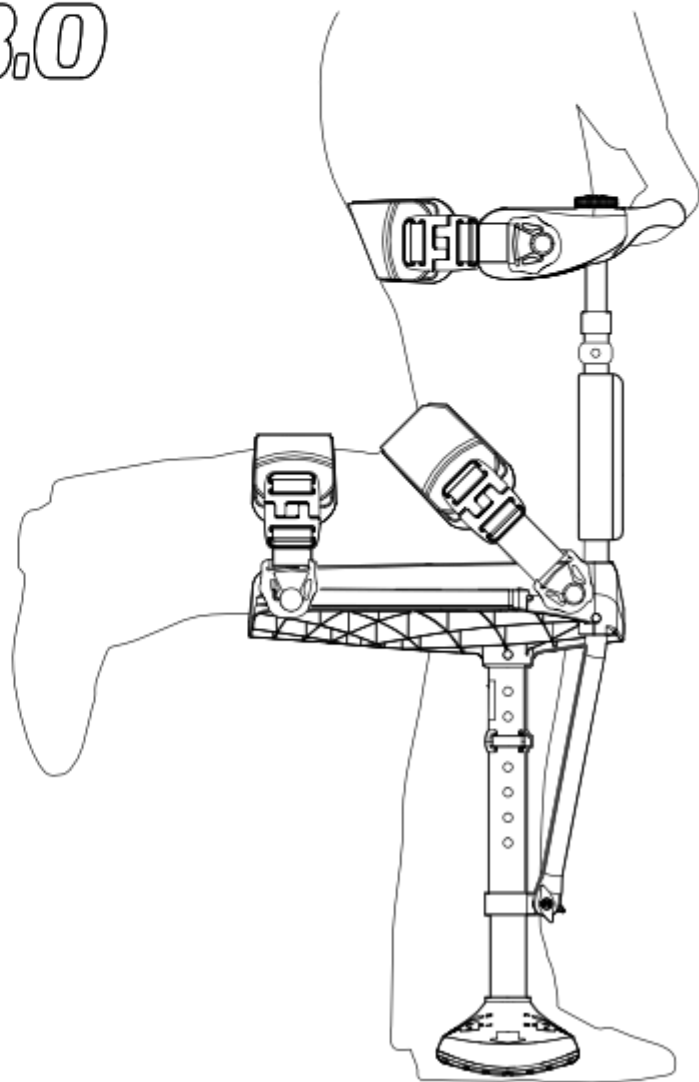

Online-Version
Deutsch



gehilfenmiete.de/Instruktionen

1 MONTAGE

Schnell, ohne Werkzeug

2 ANPASSUNG

Individuell an Ihr Bein angepasst

3 ERSTE SCHRITTE

So lernen Sie das Gehen mit iWALK3.0




Schriftliche Anleitungen können nur die Grundlagen vermitteln. Am besten lernen Sie mit unseren Videoanleitungen.

1 MONTAGE


Schnell, ohne Werkzeug

1 Unterrohr in die Knieplattform einsetzen

A Alle Teile auspacken.

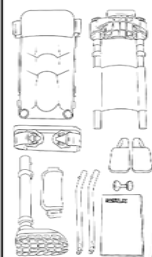

B Den Wadengurt an der Rückseite der Knieplattform abnehmen.

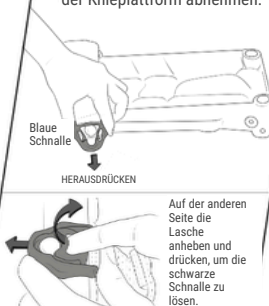

C Unterrohrereinheit in die Buchse an der Unterseite der Knieplattform schieben.



2 Oberschenkelstützen montieren

A 1. Beide blauen Rändelschrauben entfernen.




2. Linke und rechte Oberschenkelstütze montieren.



3. Rändelschrauben wieder eindrehen und nur zu 50 % anziehen.


B Oberschenkelstütze anheben und drehen, bis der Zeiger auf Stufe 6 steht.

Falls sie sich nicht drehen lässt, Rändelschraube lösen.

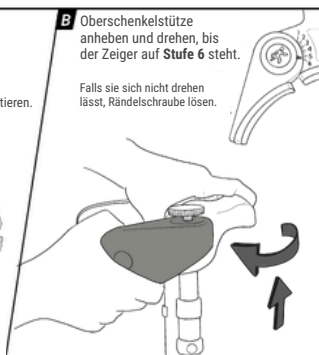


3 Obere Krückeneinheit in die Knieplattform einsetzen

A Rohre in die Buchsen vorne an der Knieplattform einsetzen.

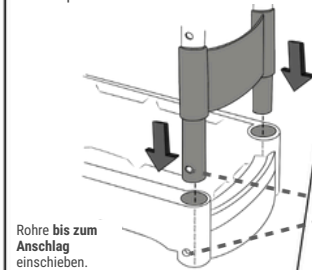


B Die Bohrung am Rohrende muss mit der Bohrung seitlich an der Buchse der Knieplattform übereinstimmen.

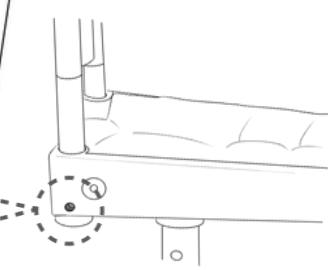

4 Stützrohre einsetzen (links und rechts)

A Rechtes und linkes Stützrohr am eingepprägten „R“ bzw. „L“ oben am Rohr erkennen.

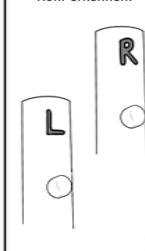


B Rechtes Stützrohr in die Buchse unten rechts an der Knieplattform einsetzen. Einschieben, bis der Federknopf seitlich an der Knieplattform aus der Bohrung springt.



Für das linke Stützrohr wiederholen.

C Die Bohrungen unten an den Stützrohren müssen mit den Bohrungen der Klemme übereinstimmen.

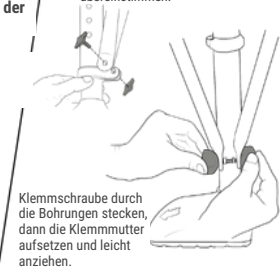

Klemmschraube durch die Bohrungen stecken, dann die Klemmmutter aufsetzen und leicht anziehen.


5 Fuß für linkes oder rechtes Bein einstellen

A Oben auf dem Fuß ist ein Pfeil aufgedruckt. Am rechten Bein muss der Pfeil nach rechts zeigen, am linken Bein nach links.




Beispiel mit Krücke am rechten Bein:

B 1. Zum Umstellen des Fußes die blaue untere Höhenverstellclip entfernen.

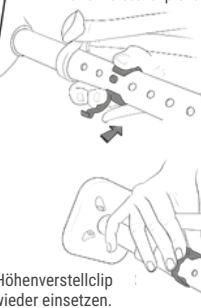

2. Fuß und Fußrohr um 180 Grad drehen.

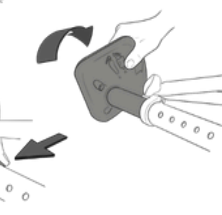

3. Höhenverstellclip wieder einsetzen.



Unsere Videos
ansehen zu
**ANPASSUNG &
ERSTE
SCHRITTE**

gehilfenmiete.de/instruktionen

WARUM SOLL ICH MIR DIE VIDEOANLEITUNGEN ANSEHEN?

Die erste Anpassung und das Erlernen des Gehens mit dem iWALK sind sehr individuelle Vorgänge. Die Videoanleitungen liefern Ihnen genau die Informationen, die Sie für einen schnellen und sicheren Erfolg brauchen – viel ausführlicher, als es schriftlich möglich ist.


2 ANPASSUNG

Individuell an Ihr Bein angepasst

Grundlagen – ausführliche, persönliche Anleitung in den Videos


Höhenverstellung Unterschenkel

Für gleiche Beinlänge

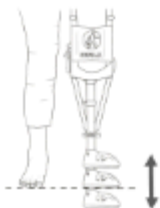

Höhenverstellung Oberschenkel

Stabilisiert die Krücke, indem die Oberschenkelstützen möglichst hoch am Oberschenkel sitzen

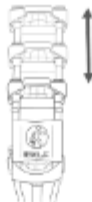

Einstellung Oberschenkelstütze

Dient zum:

1. Anpassen an den Umfang Ihres Oberschenkels
2. Einstellen des vertikalen Winkels bei X- oder O-Beinen (Valgus/Varus), passend zu Ihrem Oberschenkel



Einstellung Gurte

Dient zum:

1. Einstellen der Gurtlänge (schwarzer Abschnitt)
2. Festziehen der Gurte beim Tragen, Lockern zum Abnehmen



3 ERSTE SCHRITTE

So lernen Sie das Gehen mit iWALK3.0

Grundlagen – ausführliche, persönliche Anleitung in den Videos

Geeignete Kleidung tragen:

1. Eng anliegende Hose
2. Bequeme Schuhe mit flacher Sohle oder barfuß (keine Sandalen)

Geeignete Umgebung wählen:

1. Harter, ebener Boden (kein Teppich)
2. Ein Weg, der mind. 10 Schritte ohne Anhalten oder Wenden erlaubt
3. Keine Hindernisse im Weg
4. Handlauf, Theke oder Wand zum Abstützen



Gehen lernen:

1. Die Übungen aus den Videoanleitungen durchführen
2. Für die ersten Schritte den Griff benutzen
3. Sobald Sie gehen: weitergehen, nicht ständig anhalten und neu starten

GEBEN SIE NICHT AUF!

Manche gewöhnen sich schnell daran, andere brauchen länger. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.

Bei Bedarf steht Ihnen persönliche Unterstützung zur Verfügung.

BRAUCHEN SIE HILFE ODER EINE RÜCKGABE?



Probleme bei der Montage?



Fehlende Teile?



Probleme bei der Eingewöhnung?

KONTAKTIEREN SIE UNSER SUPPORT-TEAM




kontakt@gehilfenmiete.de



gehilfenmiete.de/kontakt



Diese Abbildung bitte bei Kontakt mit dem iWALK-Support verwenden

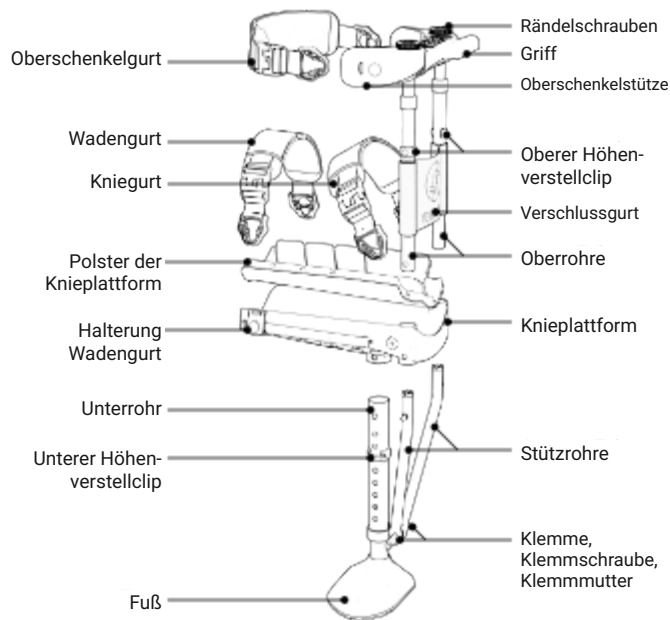

OBERE EINHEIT

UNTERE EINHEIT